

## מכשיר עיסוי מקצועי לרגליים




## הוראות הפעלה

תודה שבחרת במכשיר עיסוי מקצועי לרגליים-מכשיר המשלב עיסוי, שיאצו וחימום לרגליים. אנא קרא מדריך זה בזהירות לפני השימוש, שמור מדריך זה כל

\* שילוב של עיסוי שיאצו, עיסוי, עיסוי לחץ אוויר ותפקוד חימום יחד.

- מראה המכשיר נאה, נייד בקלות ונוח לשימוש
- עיסוי ושיאצו מאצבעות הרגליים ועד העקבים כדי לכסות את כל נקודות הדיקור.
- פונקציית העיסוי בלחץ אוויר מרגיעה ונעימה.
- שישה עוצמות עיסוי בלחץ אוויר, שתי עוצמות עיסוי ברמת מותאמת.
- מצב עבודה אוטומטי ומצב עבודה ידני זמין לבחירה.
- התאמת שתי טמפרטורות חימום ברמה: טמפרטורה נמוכה / גבוהה .
- פונקציית כיבוי אוטומטית לאחר 15 דקות .
- מתאם DC12V בטוח ואמין.

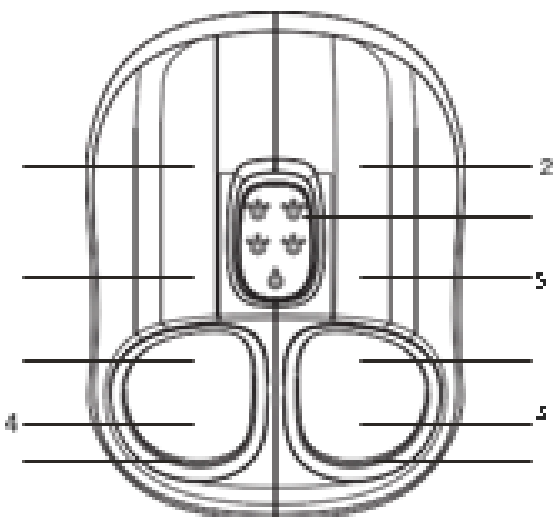

1. לוח בקרה: שלוט בפונקציות העיסוי
2. מיקום ראשי העיסוי המתגלגלים: עיסוי אזור כף הרגליים .
3. מיקום ראשי עיסוי השיאצו: עיסוי את אזור קשת כף הרגל .
4. מיקום ראש עיסוי כללי: עיסוי אזור העקב .
5. מיקום כרית האוויר: לספק פונקציית עיסוי בלחץ אוויר .
6. כיסוי בד הניתן להסרה ורחיץ .
7. שקע DC



### צורת העבודה

1. לחצן עיסוי סטנדרטי : מהירות עיסוי ברמת שתי דרגות .
2. לחצן עיסוי בלחץ אוויר: שש עוצמות עיסוי בלחץ אוויר שנבחרו במהלך העבודה הידנית .
3. לחצן אוטומטי : שני סוגים של מצבי עבודה אוטומטיים 4.
- לחצן חימום: טמפרטורה נמוכה או גבוהה
5. לחצן הפעלה: הפעל/כבה מכשיר

חבר את שקע הפלט של המתאם לשקע כבל החשמל של מעסה כף הרגל, ואז חבר לשקע מתח AC, הבאזר משמיע צליל נורת ה LED תדלק, מכשיר מסג' הרגליים מוכן לשימוש .

### מצב עבודה

הפעל את לחצן ההפעלה, מצב עבודה ידני עובד:

1. לחץ על כפתור "עיסוי" ובחר בין שני מהירויות העיסוי.
2. לחץ על כפתור "לחץ אוויר" ובחר בין שש עוצמות עיסוי אוויר  
האינדיקטור הראשון :  
\*צבע ירוק – שלב ראשון  
\*צבע אדום – שלב שני  
האינדיקטור השני:  
\*צבע ירוק – שלב שלישי  
\*צבע אדום – שלב רביעי  
האינדיקטור השלישי:  
\*צבע ירוק – שלב חמישי  
\*צבע אדום – שלב שישי
3. לחץ על כפתור "חימום" ובחר בין טמפרטורה נמוכה לגבוהה. (ניתן לכוון במצב עבודה אוטומטי או במצב עבודה ידני)

### מצב עבודה אוטומטי

1. לחץ על כפתור "Auto", מצב אוטומטי יחל לעבוד (נורית החיווי מצד שמאל תדלק), הפונקציות שלהלן יעבדו:
  - א. עיסוי לחץ אוויר משולב עם פונקצית עיסוי
  - ב. פונקצית עיסוי בלחץ אוויר
  - ג. פונקצית עיסוי
2. לחץ שוב על כפתור "Auto", מצב אוטומטי B יחל לעבוד (נורית החיווי מצד ימין דולקת) הפונקציות שלהלן יפעלו:
  - א. פונקציית עיסוי בלחץ אוויר
  - ב. פונקציית עיסוי
  - ג. שילוב מצב עיסוי אוויר עם עיסוי

**שלושת האפשרויות שלעיל מתוכננים לכיבוי אוטומטי לאחר 15 דקות**  
 3. לחץ שוב על כפתור "Auto", מצב העבודה האוטומטי אינו פעיל. מצב עבודה ידני עובד.  
 לעיסוי זה הפונקציה של "15 דקות כיבוי אוטומטי", כאשר זמן העיסוי מגיע ל 15 דקות המכשיר מפסיק לעבוד.




## יש להיוועץ ברופא לפני השימוש

### נא לקרוא בעיון הנקודות הבאות :

1. אין להשתמש במכשיר אם ישנו פצע או כיב בכף הרגל .
2. אין לעמוד או לשבת על המכשיר .
3. מומלץ להתרגל בהדרגה למכשיר בתדירות השימוש .
4. מומלץ לשימוש של פחות מ 30 דקות בכל פעם .
5. אם ישנה התחממות יתר או ריח במהלך השימוש יש להפסיק השימוש באופן מיידי ולכבות המכשיר
6. לאחר השימוש, אנא כבו את המערכת על ידי לחיצה תחילה על כפתור "ההפעלה" בבקר, ואז נתקו את תקע החשמל. אסור למשוך בכוח את התקע מהחשמל.
7. יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל לפני ניקוי ותחזוקת המכשיר .
8. ניתן לנקות ע"י מטלית לחה מכותנה ללא חומרי ניקוי
9. יש להיוועץ עם הרופא לפי שימוש במכשיר אם הנך סובל מאחד מהמצבים הבאים:
  - סרטן
  - מחלה חמורה או כרונית
  - מחלות לב
  - קוצב לב
  - שיניים תותבות
  - מחלות נפש
  - נשים הרות או ילדים
10. אסור לגרור את המכשיר.
11. לא לשימוש באיזור לח אם מכשיר העיסוי נופל למים בטעות, אנא כבו את המכשיר ונתק מהחשמל לפני הוצאתו מן המים .
12. לא לכסות את המוצר תחת הכרית או השמיכה בזמן השימוש .
13. לא לכסות את המכשיר בעת השימוש בו, , טמפרטורת המנוע תהיה גבוהה ועלולה לגרום לתקלה או נזק .
14. לא לשימוש ליד מקור חום כגון תנור
15. השתמש בחלקים מקורים בלבד.
16. לא לפרק את המכשיר לתיקון וזאת על מנת לשמור על האחריות הניתנה.
17. לביטחונך האישי ושמירה על המכשיר אנא אל תפתח את הרוכסן.
18. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה, או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם .
19. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר
20. האדם שאינו רגיש לחום נדרש לשים לב יותר לפעולת המכשיר

תופעה	סיבה אפשרית	מה ניתן לעשות
המכשיר אינו עובד?	אספקת החשמל אינה פועלת	חבר את ספק הכוח
	מגע עם תקע החשמל	בדוק את החיבור
	לחצן "הפעלה" לא נלחץ	לחץ על כפתור ההפעלה
המכשיר הפסיק לעבוד?	אין חשמל	בדוק אם ממשק אספקת החשמל מחובר היטב
	מן העיסוי הוא מעל 15 דקות	הפעל שוב את לחצן ההפעלה

\*\*\*כפתור **DEFLATE** – הנמצא על המכשיר – ברגע שיש הרגשת לחץ חזקה מידי, או אי נוחות, יש ללחוץ על כפתור זה ל-5 שניות כדי לשחרר את הלחץ של המכשיר על רגלים

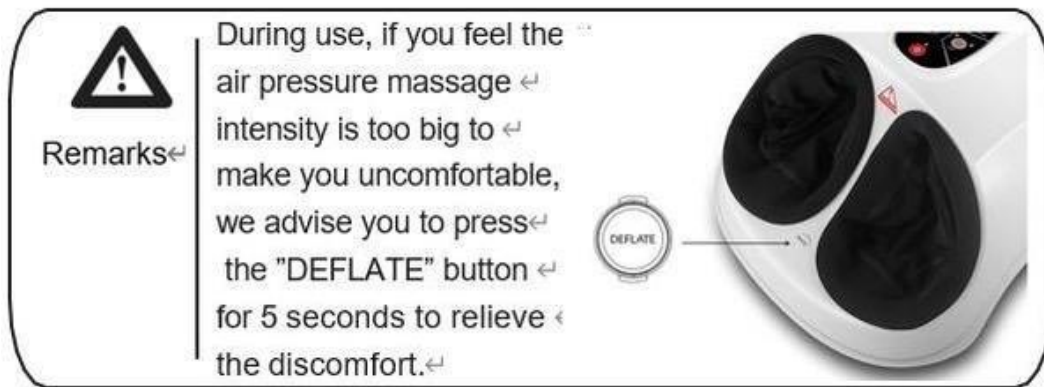

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על-ידי אדם מוסמך אחר.

שם מוצר – מכשיר עיסוי לרגליים

מתח: 12 וולט ---הספק 40: וואט